



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

PMH

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

SAHAGUN - CÓRDOBA.

2024



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA


INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de su misión La ESE Hospital San Juan de Sahagún tiene la exigencia de desarrollar sus actividades en el marco de la normatividad vigente, garantizando la adecuada gestión de los procesos de ambiente físico, en lo referente a sus instalaciones y abordando eficientemente el ciclo administrativo del Equipamiento Biomédico, buscando de esta manera una prestación eficiente, oportuna y segura de los servicios de salud en la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN.

Para esta entidad el mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua y correcta operación alargando así la vida útil de los equipos, sin riesgos para los pacientes y para el personal médico asistencial que manejan los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil y dar un servicio de excelente calidad; buscando mejorar la prestación en las áreas de servicios de infraestructura física, dotación biomédica e industrial de uso hospitalario, muebles de uso administrativo y asistencial, sistemas de comunicación e informática y vehículos.

Por lo anterior el aspecto de mayor relevancia para el mantenimiento de la entidad es conservarlo en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los recursos económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido con base en procesos establecidos y una programación desarrollada con el fin de garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño seguro de los clientes internos que se encuentran oportunidad en la solicitud del servicio.

El presente Plan es una herramienta técnico administrativa, que contiene la realización de una serie de actividades dirigidas principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a manejar el funcionamiento de los equipos de tal manera que se contribuya a garantizar la operación segura, el funcionamiento correcto, a máximas prestaciones y a costo efectivo.

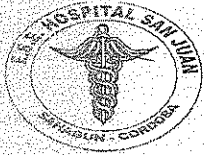

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

1. OBJETIVOS.

GENERAL

Asegurar la asignación dentro de los recursos destinados por la Institución, los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas, buscando conservar la infraestructura, equipamiento médico, equipos industriales, equipos de informática, comunicación y muebles de uso administrativo y asistencial; en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad, con el propósito de realizar una prestación óptima de los servicios de salud.

ESPECÍFICOS

- Planear, programar y aplicar los planes de mantenimiento preventivo que sean requeridos para conservación de la infraestructura y dotación de la institución para la vigencia 2021.
- Verificar cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, industriales e infraestructura.
- Documentar y mantener la información de las actividades de mantenimiento de la dotación.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos.
- Satisfacer los requisitos del sistema de gestión de calidad de la institución.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

2. MARCO LEGAL

- La Ley 100 de 1993 establece en el artículo 189 que las IPS públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o con entidades territoriales que superan el 30% de sus ingresos totales deben destinar el mínimo del 5% de su presupuesto total a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.
- En el Decreto 1769 de 1994 se establecen reglamentaciones en cuanto a la inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios.
- En el Decreto 4725 del 2005, se hacen aportes importantes referentes a la calidad del servicio de mantenimiento de los dispositivos médicos y a la tecnovigilancia postmercado para poder identificar y localizar los incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos.
- Resolución 4816 de 2008, por la cual se reglamenta el programa nacional y los planes institucionales de tecnovigilancia.
- En la Resolución 2103 del 2014, se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención. En el ítem No. 3, se establecen todos los requerimientos para la habilitación en cuanto a dotación y mantenimiento, como también sus modos de verificación correspondientes.

Para dotación y mantenimiento, los principales requerimientos de habilitación son: inventarios, hojas de vida de equipos, verificación de programas de mantenimiento basados en recomendaciones del fabricante y control de calidad a las actividades de mantenimiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

3. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para el Mantenimiento de equipos biomédicos e industriales del **HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN 2024** se debe contratar con personal externo debido a que en la planta de personal de la entidad no cuenta con recurso humano calificado.

ALCANCE

El presente plan aplica a todos los equipos biomédicos, industriales y planta física de la institución, los cuales sean necesarios para la atención del paciente en todos los servicios de la ESE Hospital San Juan de Sahagún.

4. DEFINICIONES

DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

EQUIPO BIOMEDICO. Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos propuestos por el fabricante para su uso en: Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte de la dotación esenciales para el funcionamiento general de la institución pertenecen a este grupo, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

MANTENIMIENTO. Acciones necesarias para que un elemento sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos cuando a consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar la calidad de servicio y fiabilidad en el funcionamiento esperada.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida, siguiendo protocolos de servicio recomendados por los fabricantes de los equipos estipulados en sus manuales técnicos y por la experiencia de cada institución en el uso de estos, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, este incluye limpieza interna, externa, y verificación de parámetros de funcionamiento.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo.

El Plan de Mantenimiento Preventivo, se divide en dos Capítulos:

Mantenimiento de la dotación

El equipo biomédico

- Equipo de prevención
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Rehabilitación

El equipo industrial de uso hospitalario

- Plantas eléctricas.
- Aire Acondicionado
- Equipos de refrigeración
- Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.
- Otros equipos industriales.

Equipos de comunicaciones e informática.

- Equipos de cómputo.
- Centrales telefónicas.
- Equipos de radiocomunicaciones.
- Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información.
- Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario.
- Otros equipos de comunicaciones e informática.

Muebles para el uso administrativo y para usos asistenciales

Mantenimiento de la infraestructura

- Edificios.
- Instalaciones físicas.
- Sistema de Redes
- Áreas adyacentes a las edificaciones.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

5. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que es contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuará la instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto pueda garantizarse la longevidad de los mismos.

Después de realizada una buena instalación es absolutamente indispensable un mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos a través del tiempo. Se ha desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL especial para los equipos adquiridos que incluye: Limpieza, lubricación, revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.

GENERALIDADES

- Las fechas de realización de mantenimientos preventivos están estipulados en el plan de mantenimiento preventivo de la institución
- El diligenciamiento de los reportes de mantenimiento se levanta para cada equipo cada vez que se le aplica el procedimiento y es firmado por el Biomédico o técnico dependiendo del tipo de equipo a mantener (biomédico o industrial) y por Auxiliar del servicio y/o responsable de cada equipo, y se archivan en las hojas de vida existentes de los equipos.
- Los equipos que cuenten con garantía vigente y equipos en comodato solo son manipulados por la empresa que suministró el equipo hasta que se cumplan los tiempos preestablecidos.
- Los equipos biomédicos e industriales a los cuales se les realiza mantenimiento se encuentran descritos en el plan de mantenimiento por área, existente en archivo de mantenimiento.
- El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se realiza de acuerdo a lo establecido en los protocolos de los fabricantes previamente definidos según el tipo de equipos.
- Teniendo en cuenta el tipo de tecnología y la clasificación por riesgo que presenta el equipo biomédico el proceso de mantenimiento preventivo lo realizará el Biomédico y/o Auxiliar de mantenimiento. Siendo responsable técnico de las actividades de mantenimiento el ingeniero.
- Si una vez finalizado el ciclo de mantenimiento, si algún equipo biomédico programado para el preventivo no recibió dicho proceso, el encargado de realizarlo deberá diligenciar el reporte de mantenimiento y en él especificar las causas por las cuales no se llevó a cabo la actividad. Igualmente, deberá terminar los mantenimientos preventivos faltantes en los primeros días del mes siguiente.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

- Los reportes de mantenimiento diligenciados por el personal que realizó el proceso a un equipo biomédico, deberán registrarse en la hoja de Registro de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.
- Al finalizar cada periodo de mantenimiento se entregaran los informes correspondientes, reportes de mantenimiento o el porcentaje de mantenimientos realizados y no realizados (teniendo en cuenta las causas de no realización. Igualmente se obtendrán los indicadores para cada uno de los encargados de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, lo cual permitirá analizar su eficiencia en la realización de dichos procesos.
- Todo este análisis junto con los indicadores obtenidos deberán quedar consignados en el registro de indicadores de mantenimiento preventivo mensual, documento que se archivara con las copias de los reportes de mantenimiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

5.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NO.	QUE SE HACE	COMO SE HACE	QUIEN LO HACE	REGISTRO
1	Realizar programación de mantenimiento de equipos.	Programar las fechas para realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos e industriales de la entidad para todo el año. Organizar los mantenimientos programados en un registro mensual de actividades.	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Plan de mantenimiento anual. Registro de actividades mensuales.
2	Verificar los planes de mantenimiento existentes.	Revisar los planes de mantenimiento para conocer las fechas programadas para todos los equipos. Al inicio de cada mes se deberá informar a la entidad correspondiente la proximidad de la realización del mantenimiento. Esto con el fin de coordinar la disponibilidad del equipo.	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Cronograma de Mantenimiento.
3	Desarrollo del mantenimiento en sitio	Se realizan las actividades de mantenimiento en el lugar donde funcionan los equipos, aplicando los protocolos de mantenimiento preestablecidos y las recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las normas de seguridad y bioseguridad según el caso. Hacer entrega formal del equipo a la persona responsable y diligenciar el reporte del servicio	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Reporte de servicio
4	Desarrollo del mantenimiento en taller de mantenimiento	Desplazarse al área correspondiente donde se encuentra el equipo a mantener, saludar cordialmente y solicitar el equipo correspondiente a la persona responsable del servicio. Retirar el equipo del área y trasladarlo hasta el taller de mantenimiento. Ubicar el equipo en el área correspondiente. Los equipos que por su tamaño o peso no puedan ser trasladados al taller de mantenimiento, se le realizara el mantenimiento en su sitio de funcionamiento.	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Reporte de servicio
4.1	Realizar el mantenimiento	Revisar el equipo correspondiente, destaparlo si lo requiere y realizarle los ajustes necesarios. Si en el mantenimiento se encuentra	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Hoja de vida de los equipos. Orden de pedido.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

		<p>un accesorio defectuoso que requiera cambio, se realiza la solicitud del mismo al almacenista, con dos cotizaciones previas.</p> <p>Revisar los parámetros de funcionamiento del equipo.</p> <p>Realizar limpieza interna y externa del equipo.</p> <p>Verificar la correcta operación del equipo durante un tiempo aproximado de 15 min o el que sea pertinente.</p> <p>Diligenciar el reporte de mantenimiento, especificando los datos allí solicitados</p>	o	Reporte de servicio.
4.2	Instalación del equipo en el área correspondiente.	<p>Trasladar el equipo en buen estado al área correspondiente y solicitar a la persona responsable del servicio para su recepción.</p> <p>Instalar el equipo en el sitio indicado y realizar prueba de funcionamiento con la persona responsable del servicio que recibe.</p> <p>Hacer firmar el reporte de mantenimiento por la persona responsable del servicio que recibe el equipo.</p> <p>Diligenciar formato de reporte de mantenimiento preventivo.</p> <p>El original del reporte de mantenimiento se archiva en la hoja de vida de los equipos y la copia en el registro de reportes de mantenimiento junto con la hoja de registros de mantenimiento preventivo.</p>	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento o	<p>Control de mantenimiento.</p> <p>Registro de mantenimiento preventivo.</p>
5	Mantenimiento correctivo	<p>Una vez recibido el reporte o la orden de servicio, se programa el servicio para realizar en sitio o retirar el equipo para intervenir en taller, se hace la reparación, si es necesario se hace la solicitud de repuestos u accesorios y se diligencian los formatos correspondientes.</p>	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento o	<p>Orden de servicio</p> <p>Orden de pedido de repuestos</p> <p>Cotizaciones</p> <p>Reporte de mantenimiento</p>
6	Plan de Mejoras y reclamos	<p>Se procederá de acuerdo a lo establecido en el enfoque general del proceso de mantenimiento.</p>	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento o	Reporte de indicadores Plan de Mejora.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

5.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

El mantenimiento de este grupo de equipos se realiza en forma semestral por el personal encargado y en ocasiones por contratista externo, se aplica el mismo esquema de mantenimiento que el de los equipos biomédicos, teniendo en cuenta para su intervención: Plantas eléctricas, Bombas de agua, Equipos de refrigeración y aire acondicionado, Otros equipos industriales de apoyo hospitalario, Equipos de Seguridad, Equipos de lavandería y cocina si aplica

5.3 MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES.

Para el mantenimiento de muebles se realizarán solo acciones correctivas que se realizarán por el encargado de mantenimiento y otros serán contratados por evento. Se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los armarios, los carros de medicamentos, camas ginecológicas, los muebles de las salas de espera entre otros.

5.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA.

Para el mantenimiento de equipos de comunicaciones e informática se aplicará la misma metodología que con los equipos biomédicos e industriales, mediante la contratación de empresas especializadas en este tipo de equipos.

Cronograma de actividades de mantenimiento a equipo de comunicaciones y de cómputo, Centrales telefónicas, Equipos de radiocomunicaciones, Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información, Todos aquellos que conformen el sistema de información.

6. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El mantenimiento de las instalaciones físicas se desarrolla en forma preventiva anual donde se intervienen en su totalidad los acabados de las instalaciones realizando resane y pintura general de paredes, cielo raso, puertas etc. Para efectos de daños ocasionales se debe hacer una solicitud por escrito al encargado de Mantenimiento. Inicialmente esta solicitud puede hacerla la persona que detecte la falla bien sea al encargado del área o la oficina de administración, quien procederá al diligenciamiento del formato para su respectiva gestión.

A partir de las revisiones de reconocimiento realizadas anualmente se identifica y se definen las áreas a intervenir:

- Instalaciones físicas, paredes, pisos, techos, cerramiento etc.
- Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas, sanitarias y redes de conducción de gases medicinales si aplica.
- Áreas adyacentes a las edificaciones.
- Tanques o alberca de reserva de agua potable
- Otros pertenecientes a la infraestructura.

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación que requiera este servicio.

La idoneidad del laboratorio se verificará con:

- Certificados de calibración de patrones
- Registros INVIMA del personal del laboratorio
- Acreditación de variables que lo requieran

Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los stickers y certificados de calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

La periodicidad de calibración será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.

Verificado y Aprobado por

MARTHA DUMAR NARANJO

Gerente ESE Hospital San Juan de Sahagún

ANEXO 1

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507

SAHAGÚN - CÓRDOBA

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHAS D/M/A	RESPONSIBLE	ACTIVIDAD
PLANTA ELÉCTRICA	Patio Externo	SEMESTRAL		CONTRATISTA EXTERNO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDICIONES, LIMPIEZA, CAMBIOS DE ELEMENTOS DETERIORADOS, CAMBIO DE ACEITE Y ACCESORIOS EN CASO NECESARIO
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	En diferentes servicios	SEMESTRAL SEGUN CRONOGRAMAS		CONTRATISTA EXTERNO	VERIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, AJUSTES, LIMPIEZA, LAVADO DE FILTRO Y CAMBIO ELEMENTOS DETERIORADOS
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	En diferentes servicios	TRIMESTRAL		CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, AJUSTES, LIMPIEZA, LAVADO DE FILTRO Y CAMBIO ELEMENTOS DETERIORADOS
BOMBAS DE AGUA	Patio de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMAS			VERIFICACIÓN, REVISIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA, CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, ENGRASE
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	Diferentes oficinas	SEMESTRAL			MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO NEVERAS

DATOS DEL EQUIPO			UBICACIÓN	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODELO	SERIE	ÁREA		MAN	REPARA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SAMSUNG		1	FARMACIA							X								
CENTRALES HACEB CENTRALES		3	LABORATORIO CLINICO							X								
CHALLENGER		1	URGENCIA							X								
CHALLENGER		1	M.INTERNA							X								
PHILIPS STARDAR		1	STOCK														X	
ESTANDAR		1	M.INT PERSONAL							X								
CHALLENGER		1	PEDIATRIA														X	
CHALLENGER		1	CIRUGIA														X	
CHALLENGER		1	PENSION														X	
OSTER		1	FISIOTERAP															
STANDAR		1	FACTURACION INTERNA PERSONAL OFICINA												X			
PHILIPS			PRESUPUESTO												X			
HACEB			GERENCIA												X			
MANTENIMIENTO REALIZADO																		
MANTENIMIENTO PROGRAMADO			NOTA : SE REALIZAN CORRECTIVO DEACUERDO A LA NECESIDAD PRESENTADA															



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024													
MARCA	MODELO	SERIE	BT U/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
STARLIGHT	ACH B5D		5TON	BANCO SANGRE																	
STARLIGHT	E603 A01		5TON	BANCO SANGRE																	
OLYMP	TA24 CSAI KC4 2		24000	BANCO SANGRE																	
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																					
MANTENIMIENTO REALIZADO																					

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024													
MARCA	MODELO	SERIE	BT U/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
STARLIGHT	CENTRAL		5TON	PEDIATRIA																	
STARLIGHT	CENTRAL		5TON	PEDIATRIA																	
STARLIGHT	CENTRAL		5TON	PEDIATRIA																	
				PEDIATRIA																	
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																					
MANTENIMIENTO REALIZADO																					



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION ÁREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODEL	SERIE	BTU/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SIGMA	SL12100M		12100	OF. PAGADURIA															
SIGMA	SL12100M		12100	OF. PERSONAL															
ROYAL	RSA D-12		12100	OF. PRESUPUESTO															
ELECTROLUX		929090381	12100	ATENCION AL USUARIO															
SIGMA			12100	JURIDICA															
LG	SJ122CD		12100	CONTABILIDAD															
LG	SJ122CD	02EX8021	12100	OF. ADMINISTRACION															
LG	SJ122CD		12100	OF. ESTADISTICA															
SIGMA			12100	SECRETARIA GERENCIA															
OLIMPIO	TWC12QB-D3NNC2A	68137	12100	GERENCIA															
SIGMA	SL18000		12100	OF. EMPAQUE - RADICACION															
LG			24000	OF. COORDINACION DE FACTURACION															
OLIMPIO			12100	ALMACEN															
TCL	TAC-24CS IH2		24000	ALMACEN															
OLIMPIO	DACZ413	OAC244S1406	24000	ALMACEN															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION ÁREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODELO	SERIE	BT U/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COOLTECH			12100	URGENCIAS (CONS. PEDIATRICO)															
KONFORTALL			12100	URGENCIAS (GINECO-OBSTETRICIA)															
OLIMPO			24000	URGENCIAS (SALA TRAUMAS)															
COMFORT FRESH			3TON	URGENCIAS (SALA DE ESPERA)															
COMFORT FRESH			24000	URGENCIA (ENTRADA CONSULTORIOS)															
SIGMA			12100	URGENCIA (CONSULTORIO 1)															
ROYAL			12100	URGENCIA (CONSULTORIO 2)															
ROYAL			12100	URGENCIA (SALA REANIMACION)															
COMFORT STAR			24000	URGENCIA (OBSERVACION ADULTOS)															
WESTINGHOUSE			24000	URGENCIA (OBSERVACION ADULTOS)															
LG			24000	URGENCIA (OBSERVACION ADULTOS)															
AIRE			3/4	URGENCIA (ADMISIONES)															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		2024											
MARCA	MODEL O	SERIE	BT U/H			ÁREA	MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
TCL			12100	CIRUGIA (STAR MEDICO)															
OLIMPO			9000	CIRUGIA (SALA RECUPERACION)															
LG			24000	CIRUGIA (STAR ENFERMERIA)															
SIGMA			9000	CIRUGIA (RECEPCION MATERIAL)															
OLIMPO			9000	CIRUGIA (SALA ESPERA)															
LG			24000	CIRUGIA (QUIROFANO)															
BIGSTORIO M			24000	CIRUGIA (QUIROFANO)															
OLIMPO			24000	CIRUGIA (QUIROFANO)															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MO DEL O	SERIE	BT U/H	ÁREA		MAINT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
KALLEY			12100	PENSION HAB 1															
BIASTORI			12100	PENSION HAB 2															
OLIMPIO			12100	PENSION HAB 3															
ROYAL			12100	PENSION HAB 4															
CONTROL STAR			12100	PENSIONH HAB 5															
OLIMPIO			12100	PENSION HAB 6															
OLIMPIO			12100	PENSION HAB 7															
WIND COOL			12100	PENSION HAB 8															
WIND COOL			12100	PENSION HAB 9															
ROYAL			12100	PENSION HAB 10															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODELO	SERIE	BT U/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMFOR			24000	LABORATORIO CLINICO															
BIGSTORIOM			24000	LABORATORIO CLINICO															
HACEB			9000	FISIOTERAPIA (TERAPIA FISICA)															
SIGMA			12100	FISIOTERAPIA (TERAPIA RESPIRATORIA)															
GE			12100	OF. FISIOTERAPIA															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODELLO	SERIE	BT U/H	ÁREA		MA	REPA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
	S		18000	MATERNIDAD															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODELO	SERIE	BT U/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
STARLIGHT	CENTRAL		500	PABELLÓN MEDICINA INTERNA															
HAWAN			12100	CUARTO ESPECIALISTAS															
COMFORT FRESH			300	AUDITORIO															
VEVERWEIN			18000	OFICINA SINTRACORP															
STARLIGHT EVERWELL			24000	RX															
MUNDODAKA			12100	ECOGRAFIA															
LG			12100	CUARTO INTERNOS															
LG			24000	CUARTO INTERNOS															
LG			12100	CITAS RX															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

DATOS DEL EQUIPO				UBICACION ÁREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
MARCA	MODELO	SERIE	BT U/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
LG			12100	FACTURACION CONSUL. EXTERNA															
SIMPLY			9000	FACTURACION CONSUL. EXTERNA															
OLYMPO			12100	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 1)															
KOMFORT ALL			18000	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 2)															
OLIMPO			18000	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 3)															
ROYAL			12100	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 4)															
ROYAL			12100	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 5)															
ROYAL			18000	CONSUL. EXTERNA (PEDIATRIA)															
KOMFORT ALL			18000	CONSUL. EXTERNA (SALA ESPERA)															
SIGMA			12100	CONSUL. EXTERNA (SIAU)															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

MANTENIMIENTO AMBULANCIA AÑO 2024 AMBULANCIA TLQ 797

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CAMBIO DE ACEITE	22 / 24 8000 KLS	19/24 10.000 KMTS	26/24	23/24	21/24	25/24	30/24	27/24	24/24	29/24	26/24	17/24
ENGRASE GENERAL		19 / 24		23/24		18/24		20/24		15/24		10/24
REPARACIONES												
SOAT				27/25								
REVISION TECNICO MECANICA			4 AÑOS									
LLANTAS (ALINEACION Y BALANCEO)	22/24	CADA TRES MESES		23/24			16/24			22/24		03/24
MANTENIMIENTO AIRE	CADA SEIS MESES						09/24					03/24
MANTENIMIENTO GENERAL (EN GARANTIA)	19 / 15 cada 100000 km											
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		CADA TRES Y SEIS										
LAVADO GENERAL	Semanal											
EXTINGUIDORES	ANUAL			30/24								
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	Semanal											

NOTAS


CLEDYS CORONADO
Profesional Universitaria Área Administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507

SAHAGÚN - CORDOBA

MANTENIMIENTO AMBULANCIA AÑO 2024 AMBULANCIA OFK372

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRE RO	MAR ZO	ABRI L	MAYO	JUNI O	JU LIO	AG OS TO	SEPTIEM BRE	OCTU BRE	NOVIEM BRE	DICIEM BRE
CAMBIO DE ACEITE	19 / 24 5000 500 O KLS	19/22 5000 KMTS	26/24	23/24	21/24	25/24	30/24	27/24	24/24	29/24	26/24	17/24
ENGRASE GENERAL		19 / 24		23/24		16/24		20/24		15/24		10/24
REPARACIONES												
SOAT				24/25								
REVISION TECNICO MECANICA			25									
LLANTAS (ALINEACION Y BALANCEO)	19/24	CADA TRES MESES		23/24			16/24			22/24		03/24
MANTENIMIENTO AIRE	CADA SEIS MESES						09/24					03/24
MANTENIMIENTO GENERAL (EN GARANTIA)	19 / 15 cada 5.000 km											
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1 garan tia	CADA TRES Y SEIS										
LAVADO GENERAL	Semana											
EXTINGUIDORES	ANNUAL											
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	Semana											

NOTAS



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA BOMA DE INFUSION AÑO 2024

FECHA	CANTIDAD	UBICACION	ACTIVIDAD
MARZO DE 2024 JULIO 2024	15 BOMBAS SE ENCARGA EL COMODATO - MEDIGEM	Cirugía: 2 MEDECINA INTERNA 3 PENSION 3 PEDIATRIA 2 URGENCIAS 5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS DE INFUSION.
	UNIVERSAL KABY		GALIBRACION
	BOMBA VOLUMETRICA INFUNDIR VOLUMEN Y MEDICAMENTO AL PACIENTE.		REVISION GENERAL DEL SISTEMA.


CLEDYS CORONADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA ADMINISTRATIVA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO Y DE CAÑERIAS 2024

SISTEMA HIDRAULICO DE CAÑERIAS		UBICACIÓN	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2024											
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	GENERAL		MAINT	REPARA	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
LIMPIEZA	LUCAS PEDRAZA	X					X					X					
REVISION DE CAJAS		X					X					X					
DESINFECCION DE ALBERCA Y TANQUE ELEVADO		X						X					X				
CAMBIO DE FILTRO		X						X					X				
MANTENIMIENTO REALIZADO																	
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																	

Profesional universitaria
 Área administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR ELECTRICO 2024

Actividades de mantenimiento	Periodicidad	Fecha de realización
Limpieza del área de subestación	Anual	15/04/2024
Revisión de líneas de alta tensión		
Revisión de tablero eléctrico		
Responsable del mantenimiento	AFINIA – ELECTRICISTA CONTRATADO	

Profesional universitaria
Área administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 2024

ACTIVIDAD	ENE RO	FEB RER O	MAR ZO	AB RIL	MA YO	JUN IO	JUL IO	AGO STO	SEPTIE MBRE	OCTU BRE	NOVIE MBRE	DICIE MBRE
CAMBIO DE ACEITE			X							X		
ENGRASE			X							X		
REPARACIONES			X							X		
CAMBIO DE FILTRO			X							X		
Mantenimiento realizado												
Mantenimiento programado												

Nota: _____

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
 MANTENIMIENTO

Fernando...
 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

[Signature]
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 AREA ADMINISTRATIVA

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
 esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LAVADORA 2024

MARCA LAVADORA	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mabe - lavado 13 kg	18- diciembre – 2117 NUEVA 1 año de garantía	Diciembre- 2024	Lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado
Mabe –lavado 13 kg	18- Diciembre – 2023 NUEVA SIN USO 1 AÑO DE GARANTIA	Diciembre de 2024	Lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado
Torre - Mabe	18- septiembre de 2119	Marzo de 2024 Diciembre de 2024	Lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado


CLEDYS CORONADO
Profesional Universitario
Área administrativa


JAMET ARRIETA
Auxiliar de Mantenimiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO BANCO DE SANGRE 2024

BANCO DE SANGRE	En ero	Fe bre ro	Ma rzo	A br il	Ma yo	Ju nio	Julio	Ag ost o	septi embr e	octu bre	Novi emb re	Dicie mbre
Paredes							X					
Techos					X							
Pisos						X						
Luminarias								X				
Muebles y Enseres									X			
Redes eléctricas							X	X				
Redes telefónicas								X				
Redes Hidráulicas			X									
Ventanas				X								
Aires acondiciona dos	X			X			X			X		
Ventiladore s			X						X			
Plante eléctrica			X							X		
Tanque de agua	X				X				X			
Computador es					X						X	

Cledys Coronado
Cledys Coronado
 Profesional Universitario
 Área administrativa

Jamet Arrieta
Jamet Arrieta
 Auxiliar de Mantenimiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LABORATORIO CLINICO

BANCO DE SANGRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	octubre	Noviembre	Diciembre
Paredes						X						
Techos				X								
Pisos					X							
Luminarias						X						
Muebles y Enseres							X					
Redes eléctricas						X						
Redes telefónicas					X							
Redes Hidráulicas		X										
Ventanas			X									
Aires acondicionados	X			X			X			X		
Ventiladores		X										X
Planta eléctrica			X							X		
Tanque de agua	X				X				X			
Computadores						X						X

Cledys Coronado
CLEDYS CORONADO
 Profesional Universitario
 Área administrativa

Jamet Arrieta
JAMET ARRIETA
 Auxiliar de Mantenimiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPO DIGITALIZADORA RX AÑO 2024														
EQUIPO / ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO		AÑO 2024											
	PREVEN TIVO	CO RRE CTIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIGITALIZADORA RX Marca AGFA Modelo CR30X Serie 52896														
REVISION DE CASSETTES					X				X				X	
LIMPIEZA GENERAL					X				X				X	
LIMPIEZA E INSPECCION COLECTOR					X				X				X	
REVISION MECANISMOS DIGITALIZADOR					X				X				X	
CALIBRACION DE MOTORES					X				X				X	
MANTENIMIENTO REALIZADO														
MANTENIMIENTO PROGRAMADO														

CLEDYS CORONADO BERROCAL
 Profesional Universitaria
 Área Administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VENTILADORES 2024

EQUIPO	MARCA / CANT.	ACTIVIDAD	AREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTE		AÑO 2024														
					MNTO	REPA	EN E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C			
Ventilador	KDK (11)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	PENSION															X			
Ventilador	KDK (14)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	PEDIATRIA																		X
Ventilador	KDK (10)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	MATERNIDA D																		X
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	URGENCIAS																		X
Ventilador	KDK (2)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	SALA ESPERA RX																		X
Ventilador	KDK (22)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	MEDICINA INTERNA																		X
Ventilador	KDK (3)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	COCINA																		X
Ventilador	KDK (6)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	CONSULTA EXTERNA																		X
Ventilador	KDK (4)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	ARCHIVO																		X
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	BANCO DE SANGRE																		X
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	FISIOTERAPI A																		X
Ventilador	KDK (2)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	CUARTO DE MEDICOS																		X
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CABLEADO GENERAL	SALA ESPERA GERENCIA																		X
MANTENIMIENTO REALIZADO																					
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																					


Profesional Universitario
Área Administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO COMPUTADORES AÑO 2024

DEPENDENCIA	CANT	AÑO 2024											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FACTURACION INT.	7			X1						X2			
CONSULTA EXT.	2				X1						X2		
CONTABILIDAD	3			X1						X3			
ADMISIONES	2				X1						X2		
PERSONAL	2			X1						X2			
ECOGRAFIA	2				X1						X2		
LABORATORIO	1				X1						X2		
BANCO DE SANGRE	1			X1						X2			
SECRET. GERENCIA	1			X1						X2			
ADMINISTRACION	1				X1						X2		
ARCHIVO	1			X1						X2			
PRESUPUESTO	2				X1						X2		
PAGADURIA	1			X1						X2			
ESTADISTICA	2				X1						X2		
FARMACIA	1			X1						X2			
ALMACEN	1				X1						X2		
AUTORIZACIONES	1				X1						X2		
CITAS MEDICAS	1			X1						X2			
CONSULT URGENCIAS	7			X1						X2			
CONSULT CONSULTA EXT	5				X1						X2		
TOTAL	44												

ROBERTO RAMIREZ JARAMILLO
 AUXILIAR DE SISTEMAS


 CLEDYS CORONADO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 AREA ADMINISTRATIVA

 1 MANTENIMIENTO
 2 MANTENIMIENTO




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO GASES MEDICINALES 2024

ACTIVIDAD	CAPACIDAD TANQUE	FECHA DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general de tanque	2.5000 M3-100	ABRIL DE 2024 NOVIEMBRE DE 2024	CRYOGAS S.A
Revisión general de válvulas			
Mantenimiento general de pension			
Requisitos de formulario anexo de mantenimiento			
Tanque de oxígeno de gases medicinales en comodato			



CLEDYS CORONADO
Profesional Universitaria
Área Administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RECARGA EXTINTORES AÑO 2024

EQUIPO	TIPO	CANTIDAD EXISTENTE	CAPACIDAD	FECHA MANTENIMIENTO
EXTINTOR	ABC	11	5 LBS	30 ABRIL 2024
EXTINTOR	ABC	12	10 LBS	
EXTINTOR	ABC	9	21 LBS	
EXTINTOR	SOLKAFLAM	9	3700 GR	
EXTINTOR	DE AGUA A PRESION	2	2.5GL	
EXTINTOR	GAS CARBONICO	1	CO2	

CLEDYS CORONADO
Profesional Universitaria
Área Administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2024

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	UBICACIÓN	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
fotocopiadora	KYOCERA	3550	Admisiones		■												
fotocopiadora	KYOCERA	XCRO	Facturación interna		■												
fotocopiadora	KYOCERA	3550	consulta externa		■												
fotocopiadora	KYOCERA	ECOSYS M3550 IDN	Jamet Arrieta(sacar copia)		■												
fotocopiadora	KYOCERA	FS-3540	Admisiones		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	3550	LABORATORIO		■												
FOTOCOPIADORA	ARLY	FS 4200	CITAS MEDICAS		■												
FOTOCOPIADORA	URGENCIAS - OBSER	KIOSERA 3550	OBSERVACION URGE		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	FS4300	TRIAGE		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	3550	ECOGRAFIA		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	3550	MATERNIDAD		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	3550	M INTERNA		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	ALBA 3550	FACTURACION		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	3540	ALMACEN		■												
FOTOCOPIADORA	XEROX	3635	CONTABILIDAD		■												
FOTOCOPIADORA	KIOSERA	3550	GERENCIA		■												






E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507

SAHAGÚN - CÓRDOBA

Mantenimiento realizado		
Mantenimiento programado		
 CLEDYS CORONADO Profesional universitaria Área administrativa	 JHON PETRO Ingeniero de soporte comercial EQUITECH Y CIA	


CLEDYS CORONADO
Profesional Universitario
Área administrativa


JAMET ARRIETA
Auxiliar de Mantenimiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT. 812 003 851 - 0
TEL. 7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2024

VALOR PRESUPUESTO AÑO 2024		23,845,455,505
245010406-4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	27,250,000
245010406-46215	Conectores para fibra óptica_ haces de fibra óptica o cables	16,350,000
245010409-4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	65,400,000
245020504-54530	Servicios de techado e impermeabilización de techos	109,669,271
245020504-54590	Otros servicios especializados de la construcción	94,819,688
245020504-54720	Servicios de estuco y enyesado	54,500,000
245020504-54730	Servicios de pintura	32,700,000
24502080701-87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	32,700,000
24502080701-8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	58,221,565
24502080701-8715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores_ transformadores y generadores eléctricos	109,461,784
24502080701-8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	174,400,000
24502080701-8715402	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	235,780,151
24502080702-8720	Servicios de mantenimiento y reparacón de otros bienes n.c.p	72,020,317
245020904-94211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	109,000,000
TOTAL: 5% PRESUPUESTO DEFINITIVO		1,192,272,776


MONICA FLOREZ
PRESUPUESTO


CLEDEYS CORONADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
AREA ADMINISTRATIVA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN

IDENTIFICACION	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP	LA EMPRESA / LEADERSHIP																																																																																																																																																			
B-0	ANALISIS DE BATERIAS	B-01	CONEXION DE BATERIAS	B-02	REPARACION DE BATERIAS	B-03	REVISION DE BATERIAS	B-04	REVISION DE BATERIAS	B-05	BATERIAS DE EMERGENCIA	B-06	REVISION DE BATERIAS	B-07	REVISION DE BATERIAS	B-08	REVISION DE BATERIAS	B-09	REVISION DE BATERIAS	B-10	REVISION DE BATERIAS	B-11	REVISION DE BATERIAS	B-12	REVISION DE BATERIAS	B-13	REVISION DE BATERIAS																																																																																																																																																		
B-14	TEST DE BATERIAS	B-15	REVISION DE BATERIAS	B-16	REVISION DE BATERIAS	B-17	REVISION DE BATERIAS	B-18	REVISION DE BATERIAS	B-19	REVISION DE BATERIAS	B-20	REVISION DE BATERIAS	B-21	REVISION DE BATERIAS	B-22	REVISION DE BATERIAS	B-23	REVISION DE BATERIAS	B-24	REVISION DE BATERIAS	B-25	REVISION DE BATERIAS	B-26	REVISION DE BATERIAS	B-27	REVISION DE BATERIAS	B-28	REVISION DE BATERIAS	B-29	REVISION DE BATERIAS	B-30	REVISION DE BATERIAS	B-31	REVISION DE BATERIAS	B-32	REVISION DE BATERIAS	B-33	REVISION DE BATERIAS	B-34	REVISION DE BATERIAS	B-35	REVISION DE BATERIAS	B-36	REVISION DE BATERIAS	B-37	REVISION DE BATERIAS	B-38	REVISION DE BATERIAS	B-39	REVISION DE BATERIAS	B-40	REVISION DE BATERIAS	B-41	REVISION DE BATERIAS	B-42	REVISION DE BATERIAS	B-43	REVISION DE BATERIAS	B-44	REVISION DE BATERIAS	B-45	REVISION DE BATERIAS	B-46	REVISION DE BATERIAS	B-47	REVISION DE BATERIAS	B-48	REVISION DE BATERIAS	B-49	REVISION DE BATERIAS	B-50	REVISION DE BATERIAS	B-51	REVISION DE BATERIAS	B-52	REVISION DE BATERIAS	B-53	REVISION DE BATERIAS	B-54	REVISION DE BATERIAS	B-55	REVISION DE BATERIAS	B-56	REVISION DE BATERIAS	B-57	REVISION DE BATERIAS	B-58	REVISION DE BATERIAS	B-59	REVISION DE BATERIAS	B-60	REVISION DE BATERIAS	B-61	REVISION DE BATERIAS	B-62	REVISION DE BATERIAS	B-63	REVISION DE BATERIAS	B-64	REVISION DE BATERIAS	B-65	REVISION DE BATERIAS	B-66	REVISION DE BATERIAS	B-67	REVISION DE BATERIAS	B-68	REVISION DE BATERIAS	B-69	REVISION DE BATERIAS	B-70	REVISION DE BATERIAS	B-71	REVISION DE BATERIAS	B-72	REVISION DE BATERIAS	B-73	REVISION DE BATERIAS	B-74	REVISION DE BATERIAS	B-75	REVISION DE BATERIAS	B-76	REVISION DE BATERIAS	B-77	REVISION DE BATERIAS	B-78	REVISION DE BATERIAS	B-79	REVISION DE BATERIAS	B-80	REVISION DE BATERIAS	B-81	REVISION DE BATERIAS	B-82	REVISION DE BATERIAS	B-83	REVISION DE BATERIAS	B-84	REVISION DE BATERIAS	B-85	REVISION DE BATERIAS	B-86	REVISION DE BATERIAS	B-87	REVISION DE BATERIAS	B-88	REVISION DE BATERIAS	B-89	REVISION DE BATERIAS	B-90	REVISION DE BATERIAS	B-91	REVISION DE BATERIAS	B-92	REVISION DE BATERIAS	B-93	REVISION DE BATERIAS	B-94	REVISION DE BATERIAS	B-95	REVISION DE BATERIAS	B-96	REVISION DE BATERIAS	B-97	REVISION DE BATERIAS	B-98	REVISION DE BATERIAS	B-99	REVISION DE BATERIAS	B-100	REVISION DE BATERIAS

PIXA BERE	EFER	DATA	N/A	HOSPITALIZACIÓN	FEDATRIA	PP-029	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	309177	ASISTENCIA	ASISTENCIA	MIT-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	363426	ASISTENCIA	ASISTENCIA	MIT-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	33858-815073601AS	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA INTERNA	MIT-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	319548	BANCO DE SANGRE	NEFROLOGIA	BIS-014	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	NEVERA PARA REACTIVOS CENTRALES	SECTA	16141040	BANCO DE SANGRE	AREA NEFRAS	BOC-022	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	NEVERA	GEN SOLICIAO	12042102DE	BANCO DE SANGRE	AREA NEFRAS	BOC-021	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
N/A	MEGANTOSCOPIO	N/A	N/A	CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CEX-014	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	36001-10101280009	HOSPITALIZACIÓN	PEROSN	PER-001	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	098937803	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	PER-002	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	333123M-13601940031	MATERIDAD	MATERIDAD	MIT-002	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	CC-3CJ08629	HOSPITALIZACIÓN	PEROSN	MIT-002	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	DN2010022P	SALA DE PARTO	OBSTETRICIA	MIT-002	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	CC-4E12977	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-002	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	CC46123718	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-004	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	CC2121282	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-001	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	CC3CJ08622	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-005	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	333123-14150820100	HOSPITALIZACIÓN	PEROSN	PER-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	PEROSN	PER-004	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	CC3B127415	HOSPITALIZACIÓN	PEROSN	PER-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	ESTAR DE ENFERMERA	MIT-023	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	210106	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-020	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	603716	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-018	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	000065-0036	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-017	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	61-4000042	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERA	MIT-012	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	211605004	OBSTETRICIA	ADAPTACION MEDICINAL	MIT-005	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	N/A	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-006	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	4212105001	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	PER-005	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	N/A	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO	CEX-006	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	5001032	OBSTETRICIA	SALA DE PARTO 1	MIT-006	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	614680969	HOSPITALIZACIÓN	FEDATRIA	PER-004	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	614693005	HOSPITALIZACIÓN	FEDATRIA	PER-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	N/A	OBSTETRICIA	SALA DE PARTO 1	MIT-008	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	T 0211	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-015	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	NO VISIBLE	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO	CEX-004	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	5070220	BANCO DE SANGRE	PRESELECCION	BIS-014	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	FX-3002023	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO MEDICO	CEX-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	11090001321	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	URG-011	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	N/A	OBSTETRICIA	SALA DE PARTO 2	MIT-009	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	460378-14180070025	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERA	MIT-010	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	67-1303320	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MIT-011	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	098937037	OBSTETRICIA	PEROSN	PER-017	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	1137100	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-012	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	1137100	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-012	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	3302129245	BANCO DE SANGRE	FRIBRAS	BIS-012	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	50101290788	HOSPITALIZACIÓN	PEROSN	PER-003	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
B-2	MONITOR MULTIPARAMETROS	MON	04058300	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	PER-012	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE

MV	SONIDOS MULTIPARAMETRO	MAQUINA	PRECISION	IDENTIFICACION	GRUPO TIPO	EFARDE ENTRENADO	MCO-001	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	REIDER	DEBEA	N/A	65111122	51555511	MTS-033	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	THOMAS	TEIS	1122229538	05172726	55252233	MTS-034	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	MELGALON	MEJERE	24960211	05172726	55252233	MTS-037	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	NO VISIBLE	HTC-2	NO VISIBLE	SALA DE PARTO	AGRICULTURA	MTS-015	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	HOVWESB	HOVWESB	0403834	HOSPITALIZACIÓN	AGRICULTURA INTERNA	MTS-016	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	HAARWED	HAARWED	0403838	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	BOS-003	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	KEWELL	16098	N/A	CONSULTA EXTERNA	SELECCION	CEB-017	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	BIG	18098	NO VISIBLE	CONSULTA EXTERNA	MEDICO	CEB-001	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	RENVEL	16098	N/A	CONSULTA EXTERNA	MEDICO	CEB-002	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	NVA	N/A	N/A	CONSULTA EXTERNA	MEDICO	CEB-007	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	RENVEL	16098	N/A	CONSULTA EXTERNA	MEDICO	CEB-008	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	RENVEL	16098	N/A	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MTS-008	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	RENVEL	16098	N/A	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	MTS-007	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	NVA	16098	N/A	HOSPITALIZACIÓN	PERSONA	PEL-007	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	RENVEL	16098	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	PERSONA	PEL-011	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	SHIMADU	EL-6605A	050780940	BANCO DE SANGRE	SEPARACION DE	BOS-009	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	NO VISIBLE	279437	NO VISIBLE	RIELOTOMIA	COMPONENTES	BOS-010	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	BAKTER	845	845	PRUEBAS	FLUORIMETRIA	BOS-028	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	BUITRON	845	845	PRUEBAS	INFECIOSAS	BOS-028	FEBRERO	FEBO	AGOSTO	NOVIEMBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ALLA FRANK	DIGITAL	1-127	LABORATORIO CLINICO	NEVRA	LAB-006	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ALLA FRANK	DIGITAL	NO VISIBLE	LABORATORIO CLINICO	NEVRA	LAB-007	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ALLA FRANK	DIGITAL	NO VISIBLE	LABORATORIO CLINICO	MICROBIOLOGIA	LAB-008	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ALLA FRANK	ANALOGO	1-107	LABORATORIO CLINICO	NEVRA ALMACEN	LAB-003	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	KJ	7318	NO VISIBLE	LABORATORIO CLINICO	AREA ALMACEN	LAB-002	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ALLA FRANK	ANALOGO	1-108	LABORATORIO CLINICO	HEMATOLOGIA	LAB-004	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ALLA FRANK	ANALOGO	1-108	LABORATORIO CLINICO	HEMATOLOGIA	LAB-005	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	KT	7318	NO VISIBLE	LABORATORIO CLINICO	QUIMICA	LAB-026	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 1000	2133025	TERAPIA ESICA	PASTOROLOGIA	LAB-026	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 1000	2133037	TERAPIA ESICA	ROTEPIRIA	LAB-026	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 1000	2133055	TERAPIA ESICA	ROTEPIRIA	LAB-026	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 1000	2133058	TERAPIA ESICA	ROTEPIRIA	LAB-026	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 2000	2135008	PSICOTERAPIA	TERAPIA ESICA	FS-030	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 2000	2135001	PSICOTERAPIA	TERAPIA ESICA	FS-031	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	GND	ELECTRO 2000	2135004	PSICOTERAPIA	TERAPIA ESICA	FS-032	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	ARFX	GM3207	20416074	PSICOTERAPIA	TERAPIA ESICA	FS-033	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	THOMAS	1190-067	8940000864	PSICOTERAPIA	RESPIRATORIA	PS-004	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	RAYOX PRO	SHE10-3004A	6-6576	PSICOTERAPIA	RESPIRATORIA	PS-004	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	BRAND	100-1000PL	3036191	LABORATORIO CLINICO	QUIMICA	LAB-015	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	BODECO	5-S6UL	K272421	LABORATORIO CLINICO	QUIMICA	LAB-016	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	N/A	N/A	N/A	LABORATORIO CLINICO	HEMATOLOGIA	LAB-012	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	CENTRALES	CC6036400	095231042	LABORATORIO CLINICO	QUIMICA	LAB-017	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	CENTRALES	CC6036400	112340237	LABORATORIO CLINICO	MICROBIOLOGIA	LAB-018	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	CENTRALES	CC6036400	1209103404	LABORATORIO CLINICO	ALMACEN	LAB-019	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
1113	REGULATORIO AL PULSO	CENTRALES	CC6036400	120560001463	LABORATORIO CLINICO	TERAPIA RESPIRATORIA	FS-013	ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE